



## KICK THE TICK® expert - INSTRUKCJA UŻYWANIA

przyrząd  
do bezpiecznego  
usuwania kleszczy  
KICK THE TICK®

preparat  
do zamrażania  
kleszczy  
KICK THE TICK®



### ZASTOSOWANIE

**KICK THE TICK® expert ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY** jest wyrobem medycznym przeznaczonym do usuwania kleszczy żerujących na skórze ludzi i zwierząt.

Zalecany jest w celu ograniczenia ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze, takimi jak: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, babeszjoza, anaplazmoza i inne.

### SPIS TREŚCI

1. CO TO JEST KICK THE TICK® expert ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY I W JAKIM CELU JEST STOSOWANY
2. ATAK KLESZCZA I TRANSMISJA PATOGENÓW
3. SPOSÓB UŻYCIA
4. INFORMACJE DODATKOWE
5. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
6. SKŁAD KICK THE TICK® expert ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY
7. WYDAJNOŚĆ PREPARATU DO ZAMRAŻANIA KLESZCZY KICK THE TICK®
8. PRZECHOWYWANIE

### UWAGA!

Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji używania.

Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcję używania należy zachować, aby w razie potrzeby ponownie ją przeczytać.

## 1. CO TO JEST KICK THE TICK® expert ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY I W JAKIM CELU JEST STOSOWANY

KICK THE TICK® expert ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY jest stosowany w celu udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zaatakowania przez kleszcze. Zestaw KICK THE TICK® expert składa się z wyrobu medycznego do zamrażania kleszczy oraz przyrządu do bezpiecznego usuwania kleszczy KICK THE TICK®. Zamrożenie ma na celu ograniczenie ryzyka transmisji czynników chorobotwórczych przenoszonych przez kleszcza.

### SPOSÓB DZIAŁANIA WYROBU:



Zastosowanie wyrobu powoduje zamrożenie i zahamowanie wydzielania zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza.

APRF™  
technology



**Zastosowana technologia APRF™ (Anti-Parasite Removal Film)** tworzy trwałą powłokę, która zapobiega uszkodzeniu kleszcza podczas jego usuwania, co minimalizuje ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.



Dołączony do zestawu przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy KICK THE TICK® ułatwia sprawne i bezpieczne usunięcie pasożyta, co dodatkowo ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

## 2. ATAK KLESZCZA I TRANSMISJA PATOGENÓW

Ludzie i zwierzęta domowe są atakowani przez wszystkie stadia rozwojowe kleszczy, jednak najczęściej zdarza się pasożytowanie nimf i samic.

Wkłucie kleszcza nie jest odczuwalne. Przyczepiony pasożyt zostaje wykryty przypadkowo lub podczas oględzin ciała.

Wkłucie może nastąpić w każdym miejscu na ciele, ale na ogół wybierane są miejsca, gdzie skóra ludzka jest miękka i łatwa do przecięcia, np. na wewnętrznych częściach kończyn, w zagłębieniach stawowych, na szyi i na granicy włosów na głowie.

Czynniki zakaźne mogą być przenoszone do krwi żywiciela już w pierwszych godzinach po wczepieniu kleszcza.



Zwykle jednak ryzyko transmisji zarazków **znacznie wzrasta po 24 godzinach od ataku**. Zarażenie może również nastąpić w drodze kontaktu z płynami ustrojowymi rozerwanego kleszcza.

W celu ograniczenia ryzyka transmisji zakaźnych drobnoustrojów żerujące kleszcze należy usuwać tak szybko, jak to jest możliwe.

Polecamy  
**KICK THE TICK® - MAX REPELENT PLUS**  
skuteczny spray  
do ochrony  
przed atakiem  
kleszczy

potrójna ochrona  
wysoka wydajność  
potwierdzona skuteczność



200 ml

**NOWOŚĆ**




### 3. SPOSÓB UŻYCIA:

#### Krok 1: Zamrażanie żerującego kleszcza


**1**

Odpiąć przyrząd do usuwania kleszczy od aplikatora.

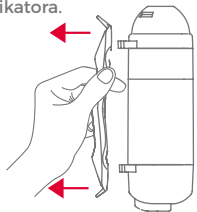


**2**

Odbezpieczyć aplikator poprzez przekręcenie pierścienia z pozycji zamkniętej do otwartej.




**3**

Przyłożyć dyszę aplikatora do kleszcza.

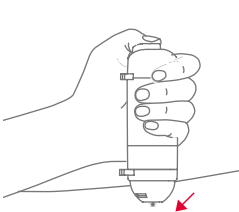


**4**

Nacisnąć przycisk aplikatora do oporu, aby uwolnić pełną dawkę \* preparatu.




**5**

Po wykonaniu zabiegu należy zabezpieczyć aplikator poprzez przekręcenie pierścienia z pozycji otwartej do zamkniętej.





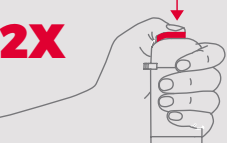

**!** Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy aktywować aplikator przez jego 2-krotne naciśnięcie.


**2X**



\* ilość dawek zależy od wielkości kleszcza (tabela poniżej):

larwa i nimfa kleszcza pospolitego ( <i>Ixodes ricinus</i> )	samica kleszcza pospolitego ( <i>I. ricinus</i> )	samica kleszcza łąkowego ( <i>Dermacentor reticulatus</i> )
<b>1 dawka</b>	<b>2 dawki</b>	<b>2 dawki</b>
   0,8mm    1,5mm	   ok. 3,5mm	   ok. 5mm
<b>końcówka A</b>	<b>końcówka B</b>	

APLIKATOR DZIAŁA POD KAŻDYM KĄTEM




**SKALA: 2:1**

#### Krok 2: Usuwanie zamrożonego kleszcza

W celu usunięcia zamrożonego kleszcza w sposób zgodny z zaleceniami medycznymi należy użyć przyrządu do bezpiecznego usuwania kleszczy KICK THE TICK®.


Zastosowanie przyrządu zgodnie z instrukcją używania ułatwia samodzielne usunięcie kleszcza w całości i ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

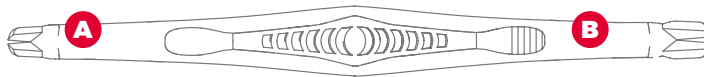

Zabieg usuwania żerującego kleszcza należy wykonać bardzo starannie, korzystając z odpowiednio wybranej końcówki (A lub B) przyrządu. Wybór końcówki przyrządu należy dostosować do rozmiaru żerującego kleszcza (larwa/nimfa lub samica).

**1**

Przy pomocy odpowiednio dobranej końcówki przyrządu do usuwania kleszczy należy mocno uchwycić przyczepionego kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry.

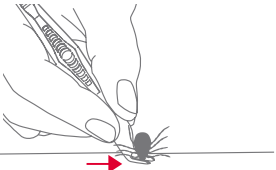

**2**


Zdecydowanym ruchem ku górze wyciągnąć kleszcza.



! nie wykręcać


**3**

Sprawdzić czy w miejscu wkłucia nie pozostały fragmenty ciała kleszcza. Zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.

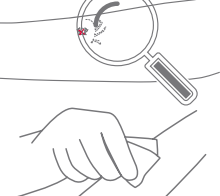

**4**

Dokonać utylizacji usuniętego kleszcza lub umieścić w probówce celem wykonania badań diagnostycznych.

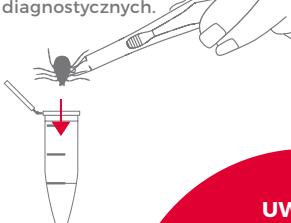

**5**

Należy zdezynfekować narzędzia użyte do zabiegu. Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować.



**WAŻNE INFORMACJE !**

Nieostrożne wykonanie zabiegu może spowodować rozerwanie kleszcza i zwiększyć ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z kleszczem zaleca się wykonywanie zabiegu w rękawiczkach ochronnych.

**UWAGA!**

W przypadku późnego zauważenia żerującego pasażera następuje trwałe umocowanie narządów gębowych, co utrudnia jego usuwanie. Pozostałe w skórze fragmenty ciała kleszcza powinien usuwać lekarz.

#### 4. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku, jeżeli kleszcz jest wczepiony w miejscu uniemożliwiającym jego samodzielne usunięcie (okolicie pachwiny, pachy, za małżowinami usznymi, dół podkolanowy), zaleca się, aby zabieg został wykonany przy pomocy osób trzecich.

Po wykonaniu zabiegu usunięcia kleszcza należy obserwować miejsce wkłucia przez kilka tygodni. Wystąpienie miejscowego lub ogólnego stanu zapalnego może być następstwem przekazania czynników zakaźnych przez pasożyta. W przypadku wystąpienia gorszego samopoczucia, gorączki lub pojawienia się rumienia wędrującego, który jest charakterystyczny dla boreliozy, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

#### 5. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ⊕ Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji używania.
- ⊕ Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.
- ⊕ W przypadku stosowania wyrobu u dzieci zabieg należy przeprowadzać pod kontrolą osoby dorosłej.
- ⊕ Nie stosować na skórę zmienioną chorobowo.
- ⊕ Nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik wyrobu.
- ⊕ Unikać kontaktu wyrobu z oczami, okolicami oczu, błonami śluzowymi ust i nosa oraz okolicami intymnymi.
- ⊕ Nie wdychać.
- ⊕ Zastosowanie zbyt dużej dawki wyrobu może spowodować zaczerwienienie skóry. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu a następnie przemyć skórę dużą ilością ciepłej (nie gorącej!) wody i osuszyć.
- ⊕ W razie utrzymujących się zmian na skórze (zbielenie lub zaczerwienienie, obrzęk, ból) należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- ⊕ Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.

#### 6. SKŁAD KICK THE TICK® expert ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY

- ⊕ Preparat do zamrażania kleszczy KICK THE TICK® o składzie: izoheksadekan, mirystynian izopropylu, 1,1,1,2-tetrafluoroetan
- ⊕ Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy KICK THE TICK®.
- ⊕ Próbowka

#### 7. WYDAJNOŚĆ preparatu do zamrażania kleszczy KICK THE TICK®

Wyrób medyczny KICK THE TICK® zawiera ok. **60 dawek**, co pozwala na bezpieczne usunięcie do **40 kleszczy**.

#### 8. PRZECHOWYWANIE

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 40°C.

#### UWAGA

Zestaw zawiera pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Chronić przed dziećmi.



#### WYTWÓRCA

ICB Pharma  
Tomasz Świętosławski, Paweł Świątosławski Spółka Jawna  
ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno